

AlcoScan Bus

사용자 메뉴얼

[Contents]

I. 사용자 인증

1. 사용자 인증	2
2. 카드 인식	3
3. 지문 인식	4

II. 측정

1. 측정	5-6
2. 측정 예러	7

III. 기타

1. 교정 알림	8
2. 예러	8
※ COM 포트 확인 방법	8-9

I. 사용자 인증

1. 사용자 인증 (*단축키 F3)

사용자 인증은 측정자의 "KSCC ID" 혹은 "이름"으로 인증하는 방법입니다.

***"KSCC ID"는 6자리로 입력 합니다.**



메인화면에서 "사용자 인증"을 클릭 합니다.



"사용자 인증" 입력창이 나타납니다.



"KSCC ID" 혹은 "이름"을 입력하면 "II. 측정" 단계로 넘어갑니다.

2. 카드 인식 (*단축키 F1)

카드 인식은 측정자가 등록한 "카드"로 인증하는 방법입니다.



메인화면에서 "카드 인식"을 클릭 합니다.



"카드를 등록기에 인식해주세요" 라는 문구와 함께 등록기에 불빛이 점등 됩니다.



카드를 인식하면 "II. 측정" 단계로 넘어갑니다.

3. 지문 인식 (*단축키 F2)

지문 인식은 측정자가 등록한 "지문"으로 인증하는 방법입니다.



메인화면에서 "지문 인식"을 클릭 합니다.



지문 인식 프로그램이 실행되며 등록기에 불빛이 점등 됩니다.




자신이 등록했던 지문을 인식하면 "II. 측정 " 단계로 넘어갑니다.


II. 측정

1. 측정


"I. 사용자 인증" 단계를 거치면 측정단계에 진입 합니다.

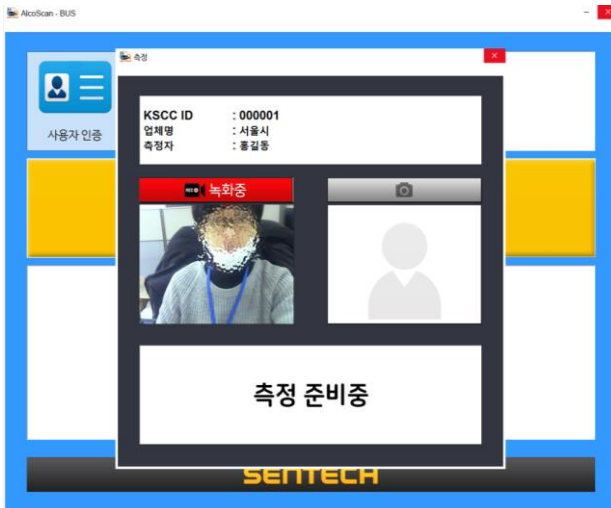


측정화면이 나타나고 "측정 준비중" 단계로 진입합니다.
이때, 다음 단계로 진입 할 때 까지 대기합니다.

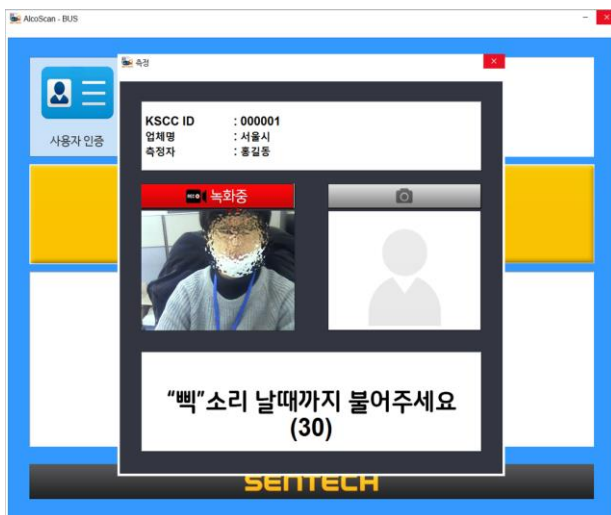


"뽁"소리 날때까지 붙어주세요" 라는 문구가 표시되며
30초 이내에 측정을 진행해야 합니다.

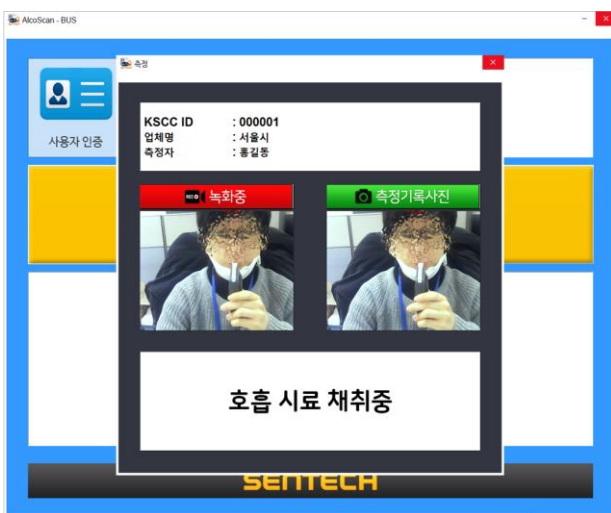

호흡이 감지되면 자동으로 시료를 채취합니다.

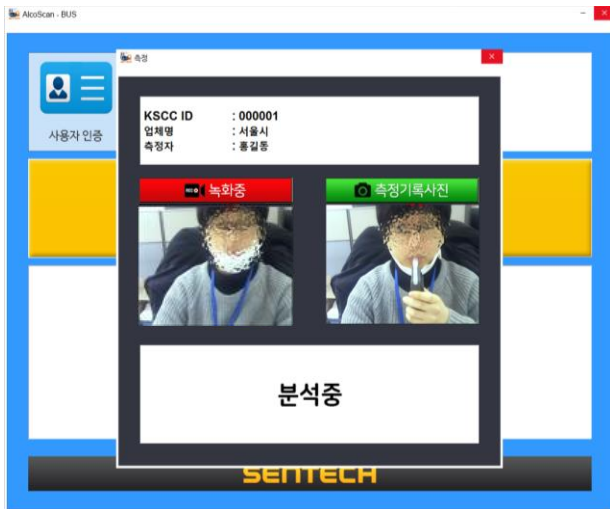

호흡시료 채취가 끝나고 "분석중" 상태로 표시됩니다.

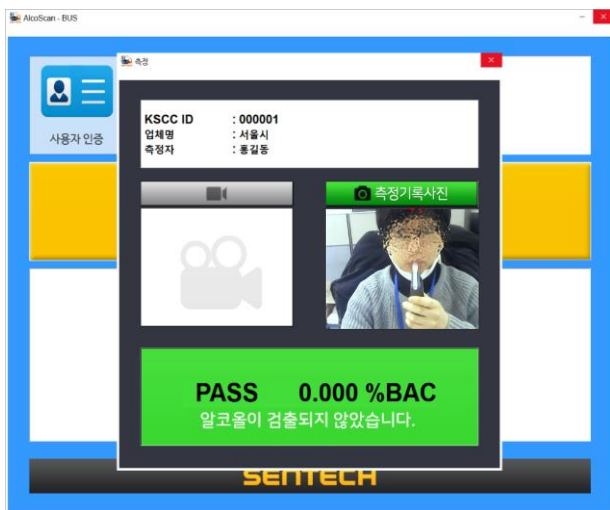

측정이 완료되면 결과값 및 피측정자 사진이 표시 됩니다.



약 15초 대기 후 메인화면으로 돌아옵니다.

2. 측정 에러

호흡 시료 부족

호흡 시료가 부족하여 발생하는 에러입니다.
호흡을 길게 하여 다시 측정 바랍니다.

전원 부족

전원을 확인해 주세요

측정기에 공급되는 전류가 부족하여 발생하는 에러입니다.
케이블 연결을 다시해보고 문제가 반복될 시 관리자에 문의해 주세요.

센서 에러

관리자에게 문의해 주세요

센서에 문제가 발생하여 나오는 에러입니다.
관리자에 문의해 주세요.

시스템 에러

관리자에게 문의해 주세요

측정기에 문제가 발생하여 나오는 에러입니다.
관리자에 문의해 주세요.

센서 모듈 에러

센서 모듈을 확인해 주세요

센서 모듈의 연결이 바르지 않아 발생하는 에러입니다.
센서 모듈의 연결을 확인 바랍니다.

온도 에러

사용 온도 범위를 벗어 났습니다.

측정기의 사용 온도 범위를 벗어나 발생하는 에러입니다.
주위 온도를 확인 바랍니다. (사용온도 $-5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$)

III. 기타

1. 교정 알림



음주 측정을 진행해 주세요
[측정기 교정일자가 지났습니다. 교정을 진행해주세요]

교정일자 초과로 재교정 요청하는 문구입니다.
교정을 진행해주세요.



음주 측정을 진행해 주세요
[측정기 사용횟수가 초과되었습니다. 교정을 진행해주세요]

사용횟수 초과로 재교정 요청하는 문구입니다.
교정을 진행해주세요.



음주 측정을 진행해 주세요
[측정기 교정일자 및 사용횟수가 초과하였습니다. 교정을 진행해주세요]

교정일자 및 사용횟수가 모두 초과되어 재교정 요청하는
문구입니다.
교정을 진행해주세요.

2. 에러



음주 측정기의 센서 모듈이 없습니다
[측정기 센서 모듈을 다시 연결해 주세요]


측정기의 센서모듈이 바르게 연결되어 있지 않아 발생하는
에러입니다.
센서모듈의 연결상태를 확인해 주세요.




음주 측정기의 연결상태를 확인해 주세요

측정기의 연결상태가 바르지 않아 발생하는 에러입니다.
1. 케이블을 분리후 정확히 다시 연결 바랍니다.
2. 문제가 해결되지 않는 경우 "COM 포트" 를 확인해 주십시오.
3. 문제가 반복될 경우 관리자에게 문의 바랍니다.


※ COM 포트 확인 방법

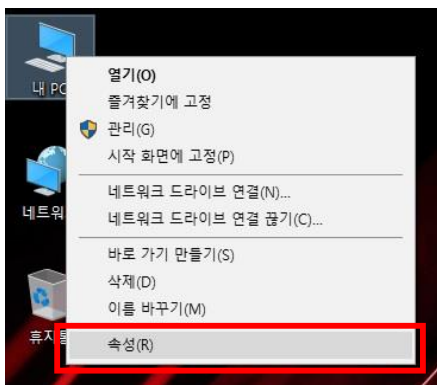

- ① "내컴퓨터"아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 '클릭'하고, "속성"을 클릭 합니다.
- ② '장치 관리자'를 클릭합니다.

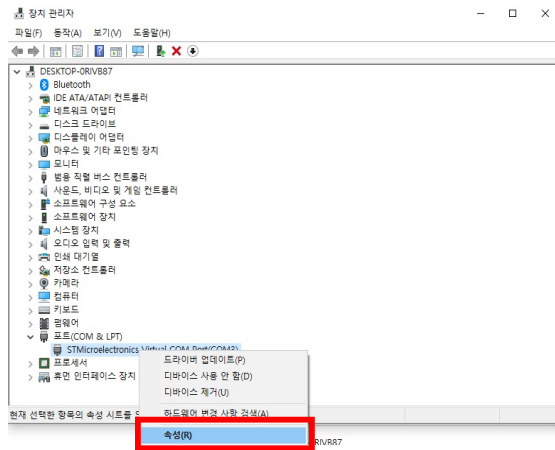

- ③ 포트(COM & LPT) 에서 STMicronics Virtual COM Port 가 "**COM3**" 으로 되어있는지 확인합니다. "COM3"이 아닐경우 STMicronics Virtual COM Port 를 오른쪽 마우스로 클릭하여 "속성"을 클릭 합니다.
- ④ "포트설정" 에서 "고급"을 클릭 합니다.

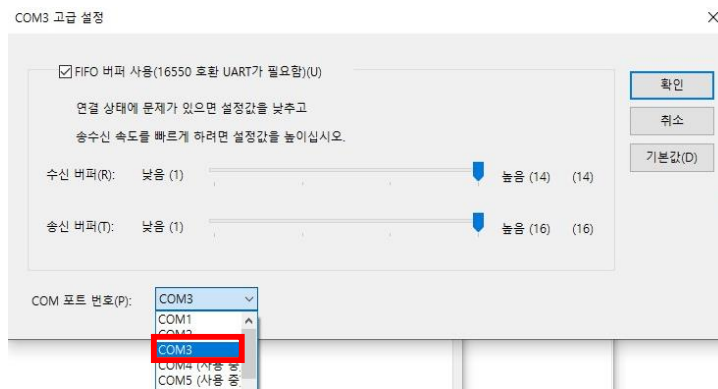

- ⑤ COM 포트 번호를 "COM3" 으로 설정 후 "확인"을 클릭합니다.